

# Bleach'n Smile

Beljenje zob v ordinaciji



**Bleach'n  
Smile**

Samo

1

obisk

Do

10

odtenkov

Samo

20

minut\*

## Sijoči beli zobje z Bleach'n Smile Automix setom – namenjen za uporabo v ordinaciji

Zagotovite individualno in učinkovito obravnavo razbarvanj in dajte svojim pacientom lep, samozavesten nasmeh.

Beli zobje so del današnjega urejenega zunanjega videza. So odraz zdravja, dobre osebne higiene in uspeha. Ljudje z belimi zobmi se zdijo samozavestnejši, prijaznejši in tudi uspešnejši v svojem poslovnem in zasebnem življenju. Temni avitalni ali razbarvani zobje, ki jih povzročajo nezgode ali bolezni, so ljudem v veliko breme. Zato je povpraševanje po beljenju večje kot kdaj koli prej.

**Želja pacientov po svetlejših zobeh, se bo z uporabo Bleach'n Smile Automix seta, spremenila v vašo korist.**

### Prednosti

Bleach'n Smile System

Posebna formula s **kalijevim nitritom** in **natrijevim fluoridom** pomaga pri odpravljanju preobčutljivosti.


- ✓ **Nevtralna pH vrednost** 7,3 pH / vrednost krvi = 7.4
- ✓ Izjemno **nežen** do obstoječih zob
- ✓ **Zanesljiv** in **hiter**
- ✓ Beljenje **avitalnih/razbarvanih zob**
- ✓ Izvrstna **stabilnost** za enostavno aplikacijo
- ✓ **Vodna osnova** - ščiti zobe pred izužitvijo
- ✓ **Preobčutljivost** po beljenju je **redkost**
- ✓ Aktivna **zaščita proti zobni gnilobi** s xylitolom (Pasta After Bleaching Care)
- ✓ Izjemna prekrivnost in zaščita dlesni (Dental dam)
- ✓ **Ekonomsko ugoden** zaradi **dvojne kartuše** in **varnostne sponke**

# Dvojna kartuša in varnostna sponka

Belilni gel in aktivator se zmešata šele, ko ju vtisnemo v mešalno konico. Sistem dvojne kartuše in varnostna sponka omogočata uporabniku omejitev količine aktiviranega gela in boljšo stabilnost preostalega materiala. Vsebnost vodikovega peroksida v popolnoma aktiviranem gelu znaša 35 %.

## Prednosti sistema

- ✓ **Hitrejše in enostavnejše rokovanje** kot z dvema ločenima brizgama
- ✓ Varno shranjevanje: **brez ločevanja** in **brez zračnih mehurčkov**
- ✓ **Natančno odmerjanje** za varčnejšo uporabo
- ✓ **Varčnost:** aktivirajte le tisto količino gela, ki je nujno potrebna pri trenutni obravnavi

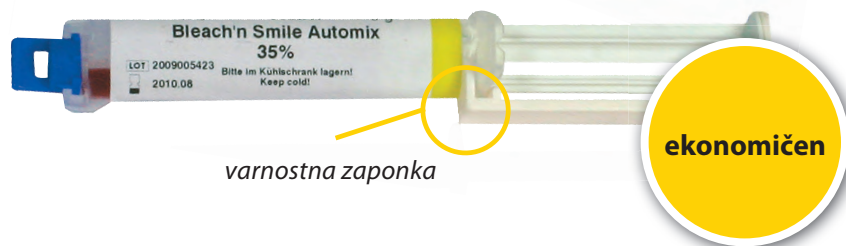

## Prepričljivi rezultati – korak za korakom

### Začetno stanje – 2M 2




Želja po bleščečem nasmehu.

### 1 Poliranje + določitev odtenka




Predpoliranje s polirno pasto brez fluorida

### 2 Uporaba zaščite dlesni

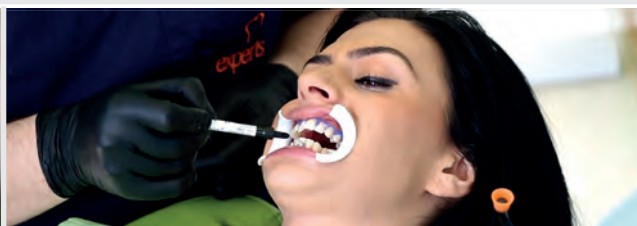

Po vstavitvi retraktorja za ustnice in lica nanesite in polimerizirajte Bleach'n Smile Dental Dam zaščito dlesni, Pomembno: ustnice premažite z vazelinom, preden vstavite retraktor za ustnice in lica

### 3 Nanos gela Bleach'n Smile

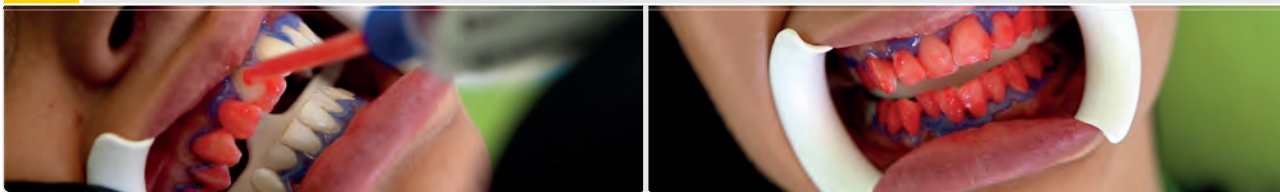

Nanesite gel na labialne površine zob (debelina filma 1-2 mm)

### 4 Sperite Gel




Sperite belini gel po pretečenem času 10 minut.

### 5 Izpiranje



Nato temeljito sperite zobe. Postopek lahko po potrebi ponovimo največ dvakrat.

### 6 Odstranite Dental Dam

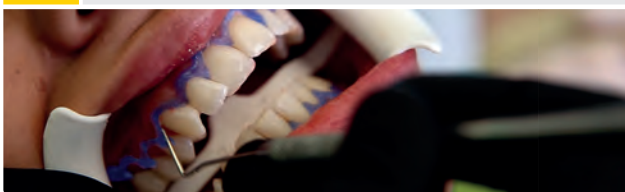


Po izpiranju skrbno odstranite Dental Dam s sondo ali pinceto.

### 7 Nega po beljenju



Na koncu nanesite pasto za remineralizacijo in desenzibilizacijo na vodni osnovi After Bleaching Care Cream.

### Rezultat – OM 2

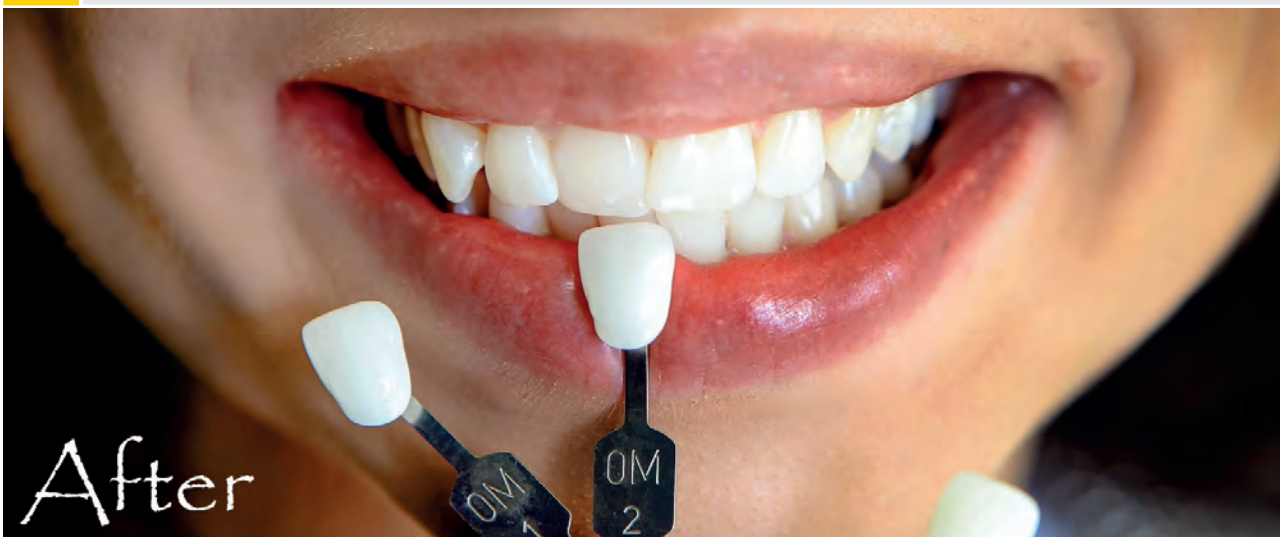

# Bleach'n Smile na hitro

## Beljenje v ordinaciji

vsebuje  
kalijev  
nitrat in  
natrijev  
fluorid

### Indikacije

- Medicinsko beljenje zob
- Za labialne ploskve
- Primeren tudi za avitalne zobe in zobe razbarvane zaradi poškodbe ali bolezni\*
- Endo beljenje

### Refill Sets

art. no. 237050



1 x Bleach'n Smile Gel 35 % H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 5 g  
1 x Dental Dam, 1.5 g, vklj. aplikacijske kanile  
1 x After Bleaching Care Cream, 2 ml



**Bleach'n Smile Gel**  
35 % vodikov peroksid  
po mešanju

art. no. 237051

### Prednosti

- ✓ Idealna stabilna konsistenca
- ✓ Enostavno in hitro rokovanje
- ✓ Visoka učinkovitost penetracije
- ✓ Nežen do obstoječih zob
- ✓ Nevtralna pH vrednost 7,3
- ✓ Brez ločevanje
- ✓ Brez zračnih mehurčkov
- ✓ Zanesljiv

### Vsebina

- ✓ 5 Bleach'n Smile belilni gel  
brizge s 35 % vodikovim  
peroksidom



**Dental Dam**  
za varno zaščito dlesni

art. no. 237020

### Prednosti

- ✓ Dobra adhezija na gingivo
- ✓ Minimalno segrevanje
- ✓ Enostaven za uporabo
- ✓ Kontrasten na gingivi
- ✓ Hitrejši kor rubber dam
- ✓ Izvrstna stabilnost med aplikacijo

### Vsebina

- ✓ 4 x 1.5 g brizga Dental Dam



**After Bleaching Care Cream**  
Remineralizacija in  
desenzibilacija zob

art. no. 237052

### Prednosti

- ✓ Aktivna zaščite pred zobno  
gnilobo s xylitolom
- ✓ Zmanjšuje občutljivost po beljenju
- ✓ Zmanjšuje hipersenzibilnost

### Vsebina

- ✓ 5 x 2 ml brizga After Bleaching  
Care Cream



+386 (0) 1 5204 800



info@prodent.si



**PRODENT**  
INTERNATIONAL

[www.prodent.si](http://www.prodent.si)

**SCHÜTZ**  **DENTAL**  
Micerium Group

Schütz Dental GmbH • Dieselstr. 5-6 • 61191 Rosbach/Germany • Tel. +49 (0) 6003 814-362 • Fax +49 (0) 6003 814-907  
[www.schuetz-dental.com](http://www.schuetz-dental.com) • [export@schuetz-dental.de](mailto:export@schuetz-dental.de)