

# ALL-BOND UNIVERSAL<sup>®</sup>

Zares preprosto. Zares vsestransko.



BISCO

ALL-BOND  
UNIVERSAL<sup>®</sup>

Light-Cured Dental Adhesive

Samo Rx



# All-Bond Universal. POPOLNA VSESTRANSKOST.

## ALL-BOND UNIVERSAL JE UNIVERZALEN IN VSESTRANSKI.

Kot resnično univerzalen adheziv, je All-Bond Universal sistem z eno stekleničko, ki je 100-odstotno združljiv z vsemi svetlobno, samo ter dvojno strjujočimi materiali in je namenjen za vse direktne in indirektne postopke. Sistem je vsestransko uporaben, saj ga je mogoče uporabiti s katero koli tehniko vezave (samojedkanje, totalno in selektivno jedkanje). Zaradi **UNIVERZALNOSTI** je All-Bond Universal nepogrešljiv del vsake zobozdravstvene ordinacije.








### ALL BOND UNIVERSAL STANDARD SET




### ALI STE VEDELI?

Optimizirana formula All-Bond Universal z nizko vsebnostjo vode omogoča, da voda izhlapi že po 10 sekundah sušenja z zrakom.

**All-Bond Universal** ima idelano kemično sestavo za samo, selektivno in totalno jedkanje:

-  Indicirano za **direktne** in **indirektne** restavracije.
-  Vsebuje **monomere MDP** za večjo obstojnost.
-  Izjemno **blaga kislost** ( $\text{pH} > 3$ ) omogoča univerzalno združljivost z materiali za dvojno strjevanje in samostrjevanje.
-  **Hidrofobna formula** (smoli prijazna) rezultira v izboljšani vezi.
-  **Tanka debelina filma** omogoča, da adheziv zlahka steče v jedkane površine ter jih kemično in mehansko zatesni.
-  Klinično ocenjevanje potrjuje, da je enostavnost uporabe prednost, ki skoraj v celoti **odpravi pooperativno občutljivost**.
-  **Shranjevanje v hladilniku ni potrebno!**

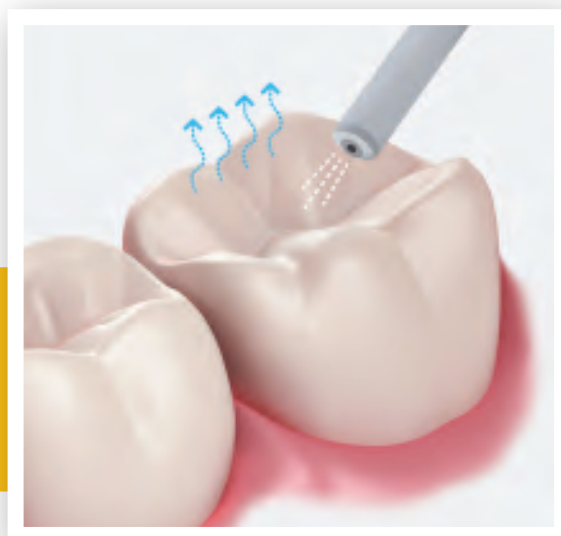




## Toliko moči V ENI KAPLJICI ...

1. Drugi adhezivi v eni steklenički pri indirektnih restavracijah morda potrebujejo več kot eno stekleničko, pri All-Bond Universal PA **AKTIVATOR NI POTREBEN!**
2. All Bond Universal je primeren za svetlobno, samo in dvojno strjujojoče smolne kompozite in cemente ter za vse direktne in indirektno postopke.
3. All-Bond Universal ponuja prilagodljivost za postopke totalnega, samo ali selektivnega jedkanja.
4. Edinstvena kemija All-Bond Universal omogoča, da sloj adheziva po polimerizaciji postane hidrofoben, kar dolgoročno podaljša njegovo obstojnost.

### Združljivost adheziva All-Bond Universal: Strižna trdnost vezave na dentin, samostrjujoči cementi (MPa)

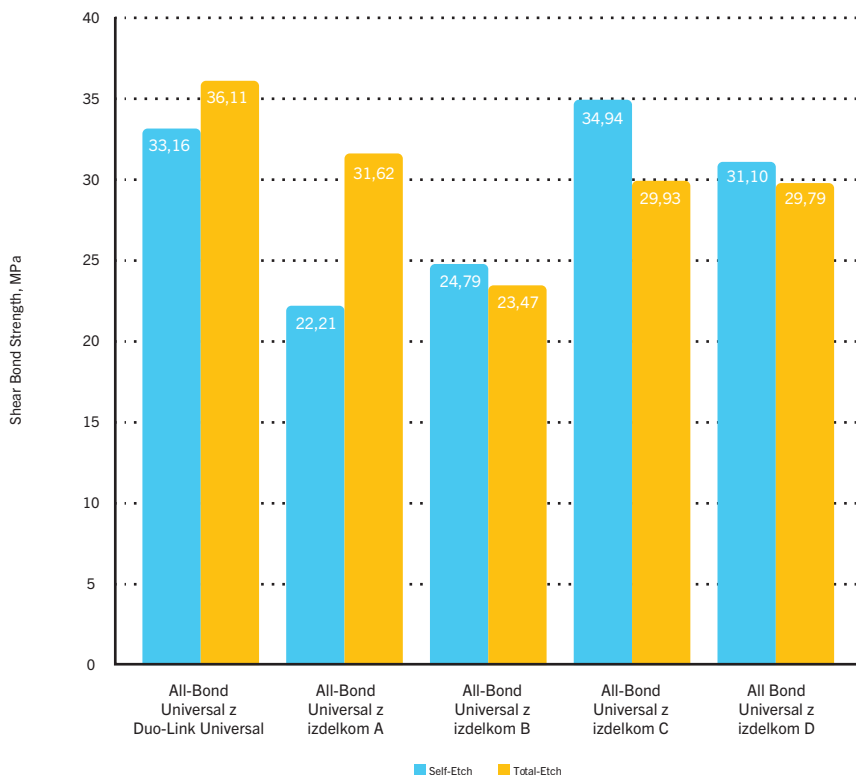

## POPOLNA ZDRUŽLJIVOST!

All-Bond Universal je odprt sistem, ki je združljiv z drugimi restavracijskimi kompozitnimi (smolnimi) cementi, brez potrebe po aktivatorju. Testiranje s kompozitnimi (smolnimi) cementi drugih proizvajalcev je pokazalo visoko strižno trdnost vezave adheziva All-Bond Universal na dentin in uspešno vezavo tako pri samojedkanju kot pri totalnem jedkanju.\*

\* Podatki na voljo pri podjetju BISCO.



# Uporaba All-Bond Universal:

## OGLEJTE SI DEJANSKI PRIMER UPORABE!

### Totalno jedkanje



1 Načrt zdravljenja: luske iz litijevega disilikata #4-#13 z minimalno pripravo sklenine.



2 Uporabljen je bila tehnika totalnega jedkanja z **Etch-37™** za 15 sekund in temeljitim spiranjem.



3 **All-Bond Universal** je bil nanesen na vlažno površino zoba v več slojih.



4 Viskoznost adheziva **All-Bond Universal** je zmanjšana z zrakom, da površina postane sijoča. Nato se svetlobno strjuje 10 sekund.



5 **zCement® L/C** je bil nanesen na površino zoba, nato je bila nameščena in svetlobno polimerizirana posamezna luska.



6 Končan postopek cementiranja lusk.

### Selektivno jedkanje



1 Končna priprava pred postopkom vezave.



2 Selektivno jedkanje sklenine.



3 Uporaba adheziva **All-Bond Universal**.



4 Svetlobno strjevanje adheziva **All-Bond Universal**.



5 Restavracija s kompozitom nanešenim v plasteh.



6 Končna kompozitna restavracija.

### Samojedkanje



1 Predoperativni pogled.



2 Priprave za cirkonijeve prevleke.



3 Nanos **Z-Prime™ Plus** na notranjo površino cirkonijeve krone.



4 Nanos adheziva **All-Bond Universal**, ki mu sledi 10 sekund svetlobnega strjevanja.



5 Nanos cementsa **Duo-Link Universal™** na cirkonijeve restavracije.



6 Končni estetski rezultat.



# VSESTRANSKOST

*/vsestránskost/ samostalnik*

---

1. možnost uporabe z direktnimi in indirektnimi restavracijami ter združljivost z materiali za svetlobno strjevanje, dvojno strjevanje in samostrjevanje.
2. ker je univerzalna vsestranskost precej črk.

*Primer: **Vsestranskost** adheziva All-Bond Universal je dr. Morenu dala občutek, da ima v eni steklenički vso energijo tega vesolja.*



VEČ  
INFORMACIJ

# Sistem All-Bond Universal v eni steklenički ponuja ZDRUŽLJIVOST in HITROST za vsakodnevno učinkovitost.

	All-Bond Universal® BISCO	Scotchbond™ Universal 3M ESPE	Optibond™ Universal Kerr	Prime & Bond Elect® Universal Dentsply Caulk	Clearfil™ Universal Bond Quick Kuraray
Totalno jedkanje in samojedkanje					
Direktne restavracije					
Indirektne restavracije		*			
Združljivost s samo, dvojno in svetlobno strjujočimi materiali		*			
Ena steklenička		*			
Aktivator ni potreben		*			

\* Potrebuje Scotchbond Universal DCA (aktivator z dvojnim strjevanjem).

Pri materialih za samostrjevanje je potreben aktivator z dvojnim strjevanjem.

Pri materialih za samostrjevanje/dvojno strjevanje je potreben aktivator z dvojnim strjevanjem.

Podatki so zbrani iz navodil za uporabo posameznih proizvajalcev. Blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

## INFORMACIJE ZA NAROČILO

All-Bond Universal Standard Set .....	B-7202B0K-EU
1 steklenička All-Bond Universal (6 ml), 1 brizga Select <sup>HV®</sup> Etch (5 g), dodatki, navodila	
All-Bond Universal posamezno pakiranje .....	B-7202P
1 steklenička All-Bond Universal (6 ml), navodila	

## ALL-BOND UNIVERSAL Unit-Dose pakiranja



50 All-Bond Universal Unit-Dose (0,20 ml/kos), dodatki, navodila.....	B-73050K
100 All-Bond Universal Unit-Dose (0,20 ml/kos), dodatki, navodila.....	B-73100K

