

# ZirClean®

## Restoration Cleaner

ZirClean je ekstraoralni čistilni gel, namenjen neabrazivnemu čiščenju veznih površin cirkonija (in drugih površin protetičnih nadomestkov) po intraoralnem preskusu (try-in).

Med preskusom fosfat v slini tvori ionsko vez s cirkonijem, ki je ni mogoče odstraniti s spiranjem z vodo ali z ultrazvočnim čiščenjem. Za uspešno odstranitev te ionske vezi je potrebna alkalna raztopina, kot je ZirClean, ki vsebuje kalijev hidroksid (KOH, pH 13).

ZirClean pomaga zagotoviti zanesljivo adhezivno cementiranje, tako da odstrani fosfatno kontaminacijo cirkonija, ki se pojavi med preskusom (velja tudi za keramiko in kovino).†



Sistem nanašanja omogoča enostavnejšo uporabo



Enostaven nanos in čiščenje



Pomaga zagotoviti zanesljivo adhezijo




Kontaminante, kot je slina, se odstrani, kar omogoči večjo trdnost vezi po preskusu†.

### Klinični pomen

Uporaba gela ZirClean omogoča zanesljivo cementiranje cirkonijevih restavracij po intraoralnem preskusu.†

† V primerjavi z neobdelanimi vzorci. Podatki na voljo pri proizvajalcu.

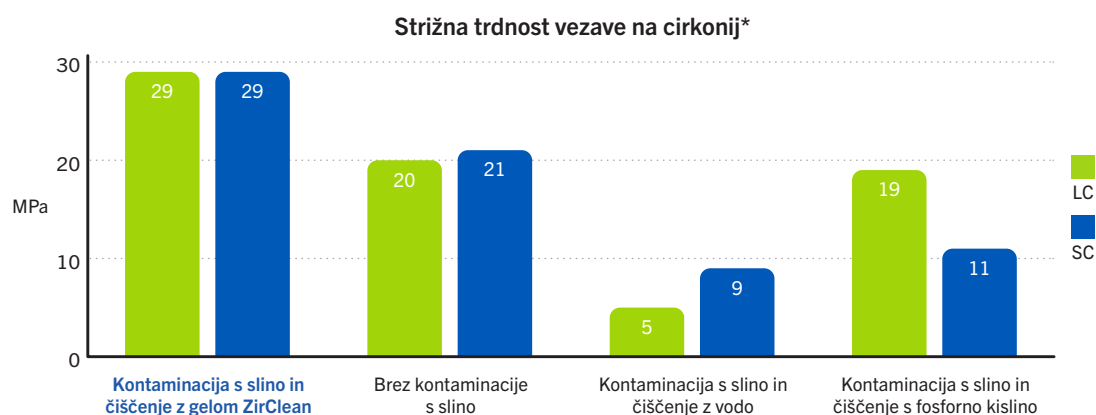

\*Strižna trdnost vezave z metodo Ultradent, restavracije so bile premazane s primerjem Z-Prime™ Plus in zacementirane z cementom Duo-Link Universal™

### Podatki za naročilo

1 brizga (5 g), 2 paketa nastavkov za brizge za enkratno uporabo (po 15 kosov), navodila..... B-7351P



Povezani izdelki  
All-Bond Universal®  
Z-Prime™ Plus

