

DENTISTRY // ZAHNMEDIZIN



ROTARY FINISHING & POLISHING INSTRUMENTS

ROTIERENDE FINIER- UND POLIERINSTRUMENTE



100 YEARS –
**MILLIONS OF
PERFECT SURFACES.**

STILL COUNTING.



100^{years}
anniversary

since 1925

Table of contents

Inhaltsverzeichnis



DENTISTRY // ZAHNMEDIZIN

GRINDING / SCHLEIFEN		RA FG
Product group / Produktgruppe	Materials / Materialien	Page / Seite
CERASTONE	Feldspar Ceramic, Amalgam, Gold, Composite, NPM alloys, Titanium Feldspatkeramik, Amalgam, Gold, Komposit, NEM-Legierungen, Titan	6
DIASYNT® plus	Feldspar ceramic, Lithium disilicate, Zirconia Feldspatkeramik, Lithium-Disilikat, Zirkonoxid	7
DIACON	Feldspar ceramic, Lithium disilicate, Zirconia, NPM alloys Feldspatkeramik, Lithium-Disilikat, Zirkonoxid, NEM-Legierungen	7

FINISHING & POLISHING / FINIEREN & POLIEREN		RA
Product group / Produktgruppe	Materials / Materialien	Page / Seite
DIACOMP® plus	Composite, Hybrid ceramic Komposit, Hybridkeramik	8 - 9
ECOCOMP	Composite Komposit	10
COMPOSOF	Composite Komposit	11
FLEXI-D	Composite, Amalgam, Gold Komposit, Amalgam, Gold	12
DIAPRINT 3D	3D Printed resin 3D-Druck-Harz	13
DIAPOL®	Feldspar ceramic, Lithium disilicate, Zirconia Feldspatkeramik, Lithium-Disilikat, Zirkonoxid	14
DIACERA	Zirconia Zirkonoxid	15
DIAPRO	Lithium disilicate Lithium-Disilikat	16
EVEFLEX	Amalgam, Gold Amalgam, Gold	17
UNIVERSAL	Composite, Feldspar ceramic, Amalgam, Gold Komposit, Feldspatkeramik, Amalgam, Gold	18
EVEBRUSH	Composite Komposit	18
BRACKET plus	Debonding Bracketentfernung	19
PROPHYCLEAN	Prophylaxis, Debonding Prophylaxe, Bracketentfernung	19
RAINBOW IPR	Composite, Enamel Komposit, Zahnschmelz	20 - 21
DIASTRIPS	Composite, Feldspar ceramic, Lithium disilicate, Zirconia, Hybrid ceramic, NPM alloys, Enamel Komposit, Feldspatkeramik, Lithium-Disilikat, Zirkonoxid, Hybridkeramik, NEM-Legierungen, Zahnschmelz	22

Symbols / Symbole


	DIAMOND IMPREGNATED DIAMANTIERT
	RECOMMENDED RPM EMPFOHLENE DREHZAHL
	TO BE USED COUNTERCLOCKWISE DREHUNG GEGEN DEN UHRZEIGERSINN
	PACKAGING UNIT VERPACKUNGSEINHEIT



www.eve-rotary.com/haendler

Want to buy EVE products?
Scan the QR code to find your local supplier.

Sie wollen EVE Produkte kaufen?
Scannen Sie den QR-Code und finden Sie einen Händler.

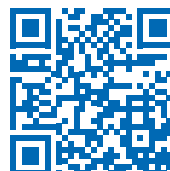

TWIST



ONE SHAPE
FOR EVERY
SURFACE



Eine Form für jede Oberfläche

TWIST XT



NEW

ESPECIALLY FOR
**NARROW
SPACES**
AND FINEST
DETAILS



Ideal für schwer zugängliche
Bereiche und feinste Details

OCCLUFLEX



THE
OCCLUSION
SOLUTION



Speziell für Okklusionsflächen

TWIST



One instrument for every dental surface
Ein Instrument für jede Zahnoberfläche



Preservation of the surface structure
Erhaltung der Oberflächenstruktur



Reduced heat generation
Geringere Wärmeentwicklung




Extraordinary durability
Außerordentliche Langlebigkeit



Intuitive application
Intuitive Anwendung



Brilliant polishing results
Brillante Polierergergebnisse

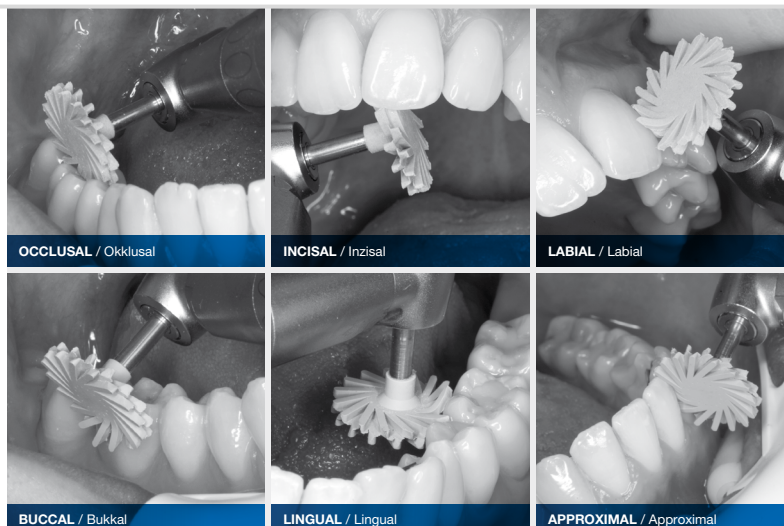

TWIST XT



Super thin and flexible shape
Superdünne und flexible Form



Preservation of the surface structure
Erhaltung der Oberflächenstruktur



Reduced heat generation
Geringere Wärmeentwicklung



Brilliant polishing results in the approximal area
Brillante Polierergergebnisse im Approximalbereich



Intuitive application
Intuitive Anwendung



OCCLUFLEX



Designed specifically for occlusal polishing
Speziell entwickelt für die Okklusionspolitur



Twisted polishing bristles reach deep fissures
Gedrehte Polierborsten erreichen tiefe Fissuren



Applicable without polishing paste
Ohne Polierpaste anwendbar




Easily reprocessable brush shape
Leicht wiederaufbereitbare Bürstenform



Intuitive application
Intuitive Anwendung



Brilliant polishing results
Brillante Polierergergebnisse

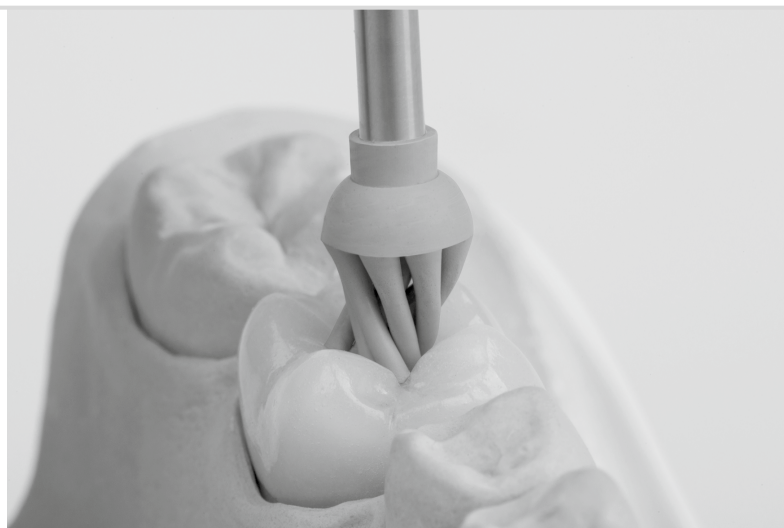

CERASTONE

RA 
// **FELDSPAR CERAMIC**

Feldspatkeramik

// **AMALGAM**

Amalgam

// **GOLD**

Gold

- ⊕ **For detailed shaping of dental materials**
Zur Feinstausarbeitung von dentalen Materialien
- ⊕ **Precision concentricity for chip-free refining**
Präzisionsrundlauf für splitterfreies Ausarbeiten

Grit / Körnung	Silicon carbide / Siliziumcarbid
Binder / Bindung	Ceramic / Keramik
Usage / Verwendung	 Multiple / Mehrfach
Autoclavable / Autoklavierbar	Yes / Ja
Rec. rpm / Empf. U/min	 15.000 - 25.000 min ⁻¹



FINE FEIN

Item / Artikel			CSG-RA-601	CSG-RA-645	CSG-RA-649	CSG-RA-661	CSG-RA-666
RA 	10	REF	8601X010	8603X010	8604X010	8605X010	8606X010
	100	REF	8601X100	8603X100	8604X100	8605X100	8606X100
Size / Maße (mm)			Ø 3 x 3	Ø 3 x 7	Ø 2,5 x 6	Ø 2,5 x 7	Ø 2,5 x 6,5

RA  **FG** 
// **COMPOSITE**

Komposit

Grit / Körnung	Aluminium oxide Arkansas stones / Aluminiumoxid Arkansas-Steine
Usage / Verwendung	 Multiple / Mehrfach
Autoclavable / Autoklavierbar	Yes / Ja
Rec. rpm / Empf. U/min	 RA: 15.000 - 25.000 min ⁻¹ FG: 80.000 - 100.000 min ⁻¹

EXTRA FINE EXTRA FEIN

Item / Artikel			CSW-RA-601	CSW-RA-645	CSW-RA-649	CSW-RA-661	CSW-RA-666
RA 	10	REF	8631X010	8633X010	8634X010	8636X010	8637X010
	100	REF	8631X100	8633X100	8634X100	8636X100	8637X100
Item / Artikel			CSW-FG-601	CSW-FG-645	CSW-FG-649	CSW-FG-661	CSW-FG-666
FG 	10	REF	8694X010	8696X010	8697X010	8698X010	8699X010
	100	REF	8694X100	8696X100	8697X100	8698X100	8699X100
Size / Maße (mm)			Ø 3 x 3	Ø 3 x 7	Ø 2,5 x 6	Ø 2,5 x 7	Ø 2,5 x 6,5

DIASYNT® plus



// **FELDSPAR CERAMIC** // **LITHIUM DISILICATE** // **ZIRCONIA**
 Feldspatkeramik Lithium-Disilikat Zirkonoxid

- ⊕ **High abrasion rate, minimised heat development**
Hohe Abtragsleistung, minimierte Hitzeentwicklung
- ⊕ **Suitable for application without water cooling**
Ohne Wasserkühlung anwendbar

Grit / Körnung	Diamond / Diamant
Binder / Bindung	Synthetic / Kunststoff
Usage / Verwendung	Multiple / Mehrfach
Autoclavable / Autoklavierbar	Yes / Ja
Rec. rpm / Empf. U/min	8.000 - 12.000 min ⁻¹

COARSE GROB



Item / Artikel			DYP-W11g	DYP-W13g	DYP-W9g
RA	1	REF	8081X001	8083X001	8079X001
	10	REF	8081X010	8083X010	8079X010
	Size / Maße (mm)		Ø 3 x 7,5	Ø 4 x 10	Ø 11,5

MEDIUM MITTEL



Item / Artikel			DYP-W11m	DYP-W13m	DYP-W9m
RA	1	REF	8181X001	8183X001	8179X001
	10	REF	8181X010	8183X010	8179X010
	Size / Maße (mm)		Ø 3 x 7,5	Ø 4 x 10	Ø 11,5

DIACON



// **FELDSPAR CERAMIC** // **LITHIUM DISILICATE** // **ZIRCONIA** // **NPM ALLOYS**
 Feldspatkeramik Lithium-Disilikat Zirkonoxid NEM-Legierungen

- ⊕ **For precise reduction of veneer and crown margins**
Für das präzise Ausdünnen von Veneer- und Kronenrändern
- ⊕ **Precise concentricity minimises the risk of chipping**
Exakter Rundlauf minimiert die Gefahr von Abplatzungen
- ⊕ **Efficient material reduction whilst resulting in a pre-polished surface**
Effizienter Materialabtrag bei gleichzeitiger Vorpolitur der Oberfläche
- ⊕ **Low wear due to hard bonding**
Geringer Verschleiß durch harte Bindung

Grit / Körnung	Diamond / Diamant
Binder / Bindung	Polyurethane / Polyurethan
Usage / Verwendung	Multiple / Mehrfach
Autoclavable / Autoklavierbar	Yes / Ja
Rec. rpm / Empf. U/min	10.000 - 15.000 min ⁻¹

MEDIUM MITTEL



Item / Artikel			DI-W13m	DI-W8m
RA	1	REF	6783X001	6748X001
	10	REF	6783X010	6748X010
	Size / Maße (mm)		Ø 4 x 10	Ø 11 x 2

DIACOMP® plus

DIAMOND IMPREGNATED
Diamantiert2 PROCESSING STEPS
Bearbeitungsschritte

RA

// COMPOSITE // HYBRID CERAMIC
Komposit Hybridkeramik

- ⊕ 2-step polishing system for high-shine on all composite materials
2-stufiges Poliersystem für Hochglanz auf allen Kompositmaterialien
- ⊕ Polishers specifically adapted to each processing step
Polierstufen speziell abgestimmt auf den jeweiligen Bearbeitungsschritt
- ⊕ Best results even on very hard composites
Beste Ergebnisse auch auf sehr harten Kompositen

Grit / Körnung	Diamond / Diamant
Binder / Bindung	Polyurethane / Polyurethan
Usage / Verwendung	Multiple / Mehrfach
Autoclavable / Autoklavierbar	Yes / Ja
Rec. rpm / Empf. U/min	3.000 - 8.000 min ⁻¹

Set RA 348

REF 9068

3x: DT-DCP11m
3x: DT-DCP11f

Set RA 342

REF 9086

3x: DT-DCP14m
3x: DT-DCP14f

Set RA 349

REF 9067

3x: DT-DCP-XT14m
3x: DT-DCP-XT14f

Set RA 344

REF 9094

1x: DCP-W11m | DCP-Ofm | DCP3m | DCP2m
1x: DCP-W11f | DCP-Ofi | DCP3f | DCP2f

DIACOMP® plus

DIAMOND IMPREGNATED
Diamantiert2 PROCESSING STEPS
Bearbeitungsschritte

RA

// COMPOSITE // HYBRID CERAMIC

Komposit

Hybridkeramik

1. STEP
Schritt

MEDIUM MITTEL



Item / Artikel	DT-DCP14m	DT-DCP11m	DT-DCP-XT14m	DCP-OFm
RA 1 REF	6184X001	6183X001	6182X001	6175X001
10 REF	6184X010	6183X010	6182X010	6175X010
Size / Maße (mm)	Ø 14 x 1,6	Ø 11 x 1,2	Ø 14	Ø 5,5 x 8,8

1. STEP
Schritt

MEDIUM MITTEL



Item / Artikel	DCP-W11m	DCP1m	DCP3m
RA 1 REF	6181X001	6171X001	6173X001
10 REF	6181X010	6171X010	6173X010
Size / Maße (mm)	Ø 3 x 7,5	Ø 4 x 10	Ø 6 x 7,5

2. STEP
Schritt

FINE FEIN



Item / Artikel	DT-DCP14f	DT-DCP11f	DT-DCP-XT14f	DCP-OFf
RA 1 REF	6284X001	6283X001	6282X001	6275X001
10 REF	6284X010	6283X010	6282X010	6275X010
Size / Maße (mm)	Ø 14 x 1,6	Ø 11 x 1,2	Ø 14	Ø 5,5 x 8,8

2. STEP
Schritt

FINE FEIN



Item / Artikel	DCP-W11f	DCP1f	DCP3f
RA 1 REF	6281X001	6271X001	6273X001
10 REF	6281X010	6271X010	6273X010
Size / Maße (mm)	Ø 3 x 7,5	Ø 4,3 x 10,2	Ø 6 x 7,5

ECOCOMP

2 PROCESSING STEPS
 Bearbeitungsschritte

RA 

// COMPOSITE

Komposit

- ⊕ **For efficient polishing of composite surfaces**
Für die effiziente Politur von Kompositoberflächen
- ⊕ **Hard bonding for high durability**
Hart gebunden für höhere Standzeit

Set RA 210
 REF 9071

 1x: EC11m | EC7m | EC3Km | EC18m
 1x: EC11f | EC7f | EC3Kf | EC18f

 8


Grit / Körnung	Silicon carbide / Siliziumcarbid
Binder / Bindung	Polyurethane / Polyurethan
Usage / Verwendung	 Multiple / Mehrfach
Autoclavable / Autoklavierbar	Yes / Ja
Rec. rpm / Empf. U/min	 7.000 - 10.000 min ⁻¹

1. STEP

Schritt

MEDIUM MITTEL



Item / Artikel			EC11m	EC3Km	EC7m
RA 	10	REF	5181X010	5173X010	5177X010
	100	REF	5181X100	5173X100	5177X100
Size / Maße (mm)			Ø 3 x 7,5	Ø 6,5 x 9,5	Ø 5 x 10

2. STEP

Schritt

FINE FEIN



Item / Artikel			EC11f	EC3Kf	EC7f
RA 	10	REF	5281X010	5273X010	5277X010
	100	REF	5281X100	5273X100	5277X100
Size / Maße (mm)			Ø 3 x 7,5	Ø 6,5 x 9,5	Ø 5 x 10

COMPOSOFIT

3 PROCESSING STEPS
Bearbeitungsschritte

RA

// COMPOSITE

Komposit

- ⊕ **For smoothing, pre-polishing and polishing composite**
Zum Glätten, Vorpolieren und Polieren von Komposit
- ⊕ **Soft silicone bonding adapts to the composite surface**
Weiche Silikonbindung passt sich der Kompositoberfläche an

Set RA 129
REF 9089
 1x: CS11g | CS2Bg | CS7g
 1x: CS11m | CS2Bm | CS7m
 1x: CS11f | CS2Bf | CS7f


Grit / Körnung	Aluminium oxide / Aluminiumoxid
Binder / Bindung	Silicone / Silikon
Usage / Verwendung	Multiple / Mehrfach
Autoclavable / Autoklavierbar	Yes / Ja
Rec. rpm / Empf. U/min	5.000 - 8.000 min ⁻¹

1. STEP
Schritt

COARSE GROB



Item / Artikel			CS11g	CS2Bg	CS7g
RA	10	REF	2581X010	2592X010	2577X010
	100	REF	2581X100	2592X100	2577X100
Size / Maße (mm)			Ø 3 x 7,5	Ø 5 x 10	Ø 7 x 10

2. STEP
Schritt

MEDIUM MITTEL



Item / Artikel			CS11m	CS2Bm	CS7m
RA	10	REF	2681X010	2692X010	2677X010
	100	REF	2681X100	2692X100	2677X100
Size / Maße (mm)			Ø 3 x 7,5	Ø 5 x 10	Ø 7 x 10

3. STEP
Schritt

FINE FEIN



Item / Artikel			CS11f	CS2Bf	CS7f
RA	10	REF	2781X010	2792X010	2777X010
	100	REF	2781X100	2792X100	2777X100
Size / Maße (mm)			Ø 3 x 7,5	Ø 5 x 10	Ø 7 x 10

FLEXI-D

4 PROCESSING STEPS
Bearbeitungsschritte

RA 

// **COMPOSITE** // **AMALGAM** // **GOLD**
Komposit Amalgam Gold

- ⊕ **Flexible polishing discs coated with aluminium oxide (single sided)**
Flexible Polierscheibchen mit Aluminiumoxid beschichtet (einseitig)
- ⊕ **For surface preparation and interproximal polishing**
Für die Ausarbeitung der Oberfläche und die interproximale Politur
- ⊕ **For use in a pulling or pushing motion**
Ziehend und schiebend anwendbar

Grit / Körnung	Aluminium oxide / Aluminiumoxid
Binder / Bindung	Mylar foil / Mylarfolie
Usage / Verwendung	⊗ Single / Einmalgebrauch
Autoclavable / Autoklavierbar	Before use / Vor Anwendung
Rec. rpm / Empf. U/min	7.000 - 10.000 min ⁻¹

Starter Set 14

REF 9001

25x: FD-14g | FD-14m | FD-14f | FD-14sf

+ **MANDREL**
95RA 101

1. STEP

COARSE GROB



Item / Artikel		FD-14g	
RA	 100	REF	9141X100
	 101	REF	9141Y100 with mandrel
Size / Maße (mm)		Ø 14 x 0,21	
Coating / Beschichtung		single sided	

2. STEP

MEDIUM MITTEL



Item / Artikel		FD-14m	
RA	 100	REF	9142X100
	 101	REF	9142Y100 with mandrel
Size / Maße (mm)		Ø 14 x 0,17	
Coating / Beschichtung		single sided	

3. STEP

FINE FEIN



Item / Artikel		FD-14f	
RA	 100	REF	9143X100
	 101	REF	9143Y100 with mandrel
Size / Maße (mm)		Ø 14 x 0,14	
Coating / Beschichtung		single sided	

4. STEP

EXTRA FINE EXTRA FEIN



Item / Artikel		FD-14sf	
RA	 100	REF	9144X100
	 101	REF	9144Y100 with mandrel
Size / Maße (mm)		Ø 14 x 0,11	
Coating / Beschichtung		single sided	



Item / Artikel		95RA	
RA	 3	REF	9595X003
	 10	REF	9595X010
	 100	REF	9595X100
Size / Maße (mm)		—	

DIAPRINT^{3D}

NEW

	DIAMOND IMPREGNATED Diamantiert	2 PROCESSING STEPS Bearbeitungsschritte	RA 
---	------------------------------------	--	--


// 3D PRINTED RESIN

3D-Druck-Harz

- ⊕ **2-step polishing system for heat-reduced polishing and perfect shine**
2-stufiges Poliersystem für hitzereduzierte Politur und perfekten Glanz
- ⊕ **Hard polyurethane binder with fine diamond grit ensures removal and pre-polishing in the first step**
Harte Polyurethan Bindung mit feiner Diamantkörnung sorgt für Abtrag und Vorpolitur in einem Schritt
- ⊕ **Soft silicone binder in the final high-shine step requires low speed and low pressure**
Weiche Silikonbindung im letzten Hochglanz-Schritt erfordert niedrigere Geschwindigkeit und niedrigeren Druck
- ⊕ **Ergonomic design for precise, effortless application**
Ergonomisches Design für präzise, mühelose Anwendung

Set RA 330

REF 9066

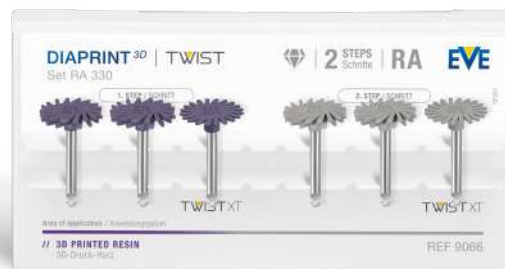2x: 3DT-W14m | 3DT-W14f
1x: 3DT-XT14m | 3DT-XT14f

Grit / Körnung	Diamond / Diamant
Binder / Bindung	
1. Step / Schritt	Polyurethane / Polyurethan
2. Step / Schritt	Silicone / Silikon
Usage / Verwendung	 Multiple / Mehrfach
Autoclavable / Autoklavierbar	Yes / Ja
Rec. rpm / Empf. U/min	 3.000 - 7.000 min ⁻¹

1. STEP
Schritt


MEDIUM MITTEL



Item / Artikel	3DT-W14m	3DT-XT14m
RA  1 REF	6114X001	6116X001
 10 REF	6114X010	6116X010
Size / Maße (mm)	Ø 14 x 1,6	Ø 14

2. STEP
Schritt

FINE FEIN

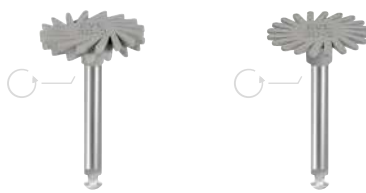

Item / Artikel	3DT-W14f	3DT-XT14f
RA  1 REF	6214X001	6216X001
 10 REF	6214X010	6216X010
Size / Maße (mm)	Ø 14 x 1,6	Ø 14

DIAPOL®

DIAMOND IMPREGNATED
Diamantiert3 PROCESSING STEPS
Bearbeitungsschritte

RA

// FELDSPAR CERAMIC

Feldspatkeramik

// LITHIUM DISILICATE

Lithium-Disilikat

// ZIRCONIA

Zirkonoxid

- ⊕ **3-step polishing system for all porcelain materials**
3-stufiges Poliersystem für Hochglanz auf allen keramischen Materialien
- ⊕ **Diamond grit for highest efficiency**
Diamantkörnung für höchste Effizienz
- ⊕ **Surface corrections without additional glazing**
Schnelle Oberflächenkorrekturen ohne zusätzlichen Glanzbrand

Grit / Körnung	Diamond / Diamant
Binder / Bindung	Polyurethane / Polyurethan
Usage / Verwendung	Multiple / Mehrfach
Autoclavable / Autoklavierbar	Yes / Ja
Rec. rpm / Empf. U/min	7.000 - 12.000 min ⁻¹ *3.000 - 8.000 min ⁻¹



Set RA 306

REF 9088

2x: DT-W14Dg
2x: DT-W14Dmf
2x: DT-W14D

6



Set RA 307

REF 9061

1x: W16Dg | OF-Dg | W17Dg | W18Dg
1x: W16Dmf | OF-Dmf | W17Dmf | W18Dmf
1x: W16D | OF-D | W17D | W18D

12

1. STEP
Schritt

COARSE GROB



Item / Artikel			DT-W14Dg	OF-Dg	W11Dg	W16Dg	W17Dg
RA	1	REF	7084X001	7075X001	7081X001	7086X001	7087X001
	10	REF	7084X010	7075X010	7081X010	7086X010	7087X010
Size / Maße (mm)			Ø 14 x 1,6	Ø 5,5 x 8,8	Ø 3 x 7,5	Ø 4 x 10	Ø 6 x 7,5

2. STEP
Schritt

MEDIUM MITTEL



Item / Artikel			DT-W14Dmf	OF-Dmf	W11Dmf	W16Dmf	W17Dmf
RA	1	REF	7184X001	7175X001	7181X001	7186X001	7187X001
	10	REF	7184X010	7175X010	7181X010	7186X010	7187X010
Size / Maße (mm)			Ø 14 x 1,6	Ø 5,5 x 8,8	Ø 3 x 7,5	Ø 4 x 10	Ø 6 x 7,5

3. STEP
Schritt

FINE FEIN



Item / Artikel			DT-W14D	OF-D	W11D	W16D	W17D
RA	1	REF	7284X001	7275X001	7281X001	7286X001	7287X001
	10	REF	7284X010	7275X010	7281X010	7286X010	7287X010
Size / Maße (mm)			Ø 14 x 1,6	Ø 5,5 x 8,8	Ø 3 x 7,5	Ø 4 x 10	Ø 6 x 7,5

DIACERA



DIAMOND IMPREGNATED
Diamantiert

2 PROCESSING STEPS
Bearbeitungsschritte

RA



// ZIRCONIA

Zirkonoxid

- ⊕ Especially suitable for monolithic zirconia restorations
Besonders geeignet für monolithische Zirkoniumdioxid-Restaurationen
- ⊕ High diamond concentration for more efficiency
Hohe Konzentration an Diamantkörnung für mehr Effizienz
- ⊕ Avoids repeated glazing after corrections
Erspart erneuten Glanzbrand nach Korrekturen

Grit / Körnung	Diamond / Diamant
Binder / Bindung	Polyurethane / Polyurethan
Usage / Verwendung	Multiple / Mehrfach
Autoclavable / Autoklavierbar	Yes / Ja
Rec. rpm / Empf. U/min	7.000 - 10.000 min ⁻¹ *3.000 - 8.000 min ⁻¹



Set RA 323
REF 9091

3x: DT-W14DCmf
3x: DT-W14DC
6



Set RA 325
REF 9063

1x: W16DCmf | OF-DCmf | W17DCmf | W18DCmf
1x: W16DC | OF-DC | W17DC | W18DC
+ DIASYNT[®] plus (Grinding / Schleifen)
DYP-W13g

9

1. STEP Schritt

MEDIUM MITTEL



Item / Artikel	DT-W14DCmf	OF-DCmf	W11DCmf	W16DCmf	W17DCmf
1 REF	7684X001	7675X001	7681X001	7686X001	7687X001
10 REF	7684X010	7675X010	7681X010	7686X010	7687X010
Size / Maße (mm)	Ø 14 x 1,6	Ø 5,5 x 8,8	Ø 3 x 7,5	Ø 4 x 10	Ø 6 x 7,5

2. STEP Schritt

FINE FEIN



Item / Artikel	DT-W14DC	OF-DC	W11DC	W16DC	W17DC
1 REF	7784X001	7775X001	7781X001	7786X001	7787X001
10 REF	7784X010	7775X010	7781X010	7786X010	7787X010
Size / Maße (mm)	Ø 14 x 1,6	Ø 5,5 x 8,8	Ø 3 x 7,5	Ø 4 x 10	Ø 6 x 7,5

DIAPRO

DIAMOND IMPREGNATED
Diamantiert2 PROCESSING STEPS
Bearbeitungsschritte

RA

// LITHIUM DISILICATE

Lithium-Disilikat

- ⊕ Especially suitable for silicate porcelain
Speziell für Silikatkeramiken
- ⊕ Diamond grit for highest efficiency
Diamantkörnung für höchste Effizienz
- ⊕ Polishing result matches glazing
Polierergebnis entspricht Glanzbrand

Grit / Körnung	Diamond / Diamant
Binder / Bindung	Polyurethane / Polyurethan
Usage / Verwendung	Multiple / Mehrfach
Autoclavable / Autoklavierbar	Yes / Ja
Rec. rpm / Empf. U/min	7.000 - 10.000 min ⁻¹ *3.000 - 8.000 min ⁻¹

Set RA 363
REF 90923x: DT-W14DPmf
3x: DT-W14DP
 6Set RA 365
REF 90651x: W16DPmf | OF-DPmf | W17DPmf | W18DPmf
1x: W16DP | OF-DP | W17DP | W18DP+ DIASYNT[®] plus (Grinding / Schleifen)
DYP-W13m

1. STEP Schritt

MEDIUM MITTEL



Item / Artikel	DT-W14DPmf	OF-DPmf	W11DPmf	W16DPmf	W17DPmf
RA 1 REF	7884X001	7875X001	7881X001	7886X001	7887X001
10 REF	7884X010	7875X010	7881X010	7886X010	7887X010
Size / Maße (mm)	Ø 14 x 1,6	Ø 5,5 x 8,8	Ø 3 x 7,5	Ø 4 x 10	Ø 6 x 7,5

2. STEP Schritt

FINE FEIN



Item / Artikel	DT-W14DP	OF-DP	W11DP	W16DP	W17DP
RA 1 REF	7984X001	7975X001	7981X001	7986X001	7987X001
10 REF	7984X010	7975X010	7981X010	7986X010	7987X010
Size / Maße (mm)	Ø 14 x 1,6	Ø 5,5 x 8,8	Ø 3 x 7,5	Ø 4 x 10	Ø 6 x 7,5

EVEFLEX

3 PROCESSING STEPS
Bearbeitungsschritte

RA

// AMALGAM // GOLD
Amalgam Gold

- ⊕ **Long service life, wear-resistant thanks to high-quality bonding**
Lange Standzeit, verschleißfest durch hochwertige Bindung
- ⊕ **Quick and easy handling, reduces processing time**
Schnelle und einfache Handhabung, reduziert die Bearbeitungszeit
- ⊕ **Uniform polishing result, ensures esthetically pleasing and smooth restorations**
Gleichmäßiges Polierergebnis sorgt für ästhetisch ansprechende und glatte Restaurationen

Set RA 209
REF 90751x: AF11 | AF7 | AF3K
1x: BV11 | BV7 | BV3K
1x: GH11 | GH7 | GH3K

Grit / Körnung	Silicon carbide / Siliziumcarbid
Binder / Bindung	Polyurethane / Polyurethan
Usage / Verwendung	Multiple / Mehrfach
Autoclavable / Autoklavierbar	Yes / Ja
Rec. rpm / Empf. U/min	7.000 - 12.000 min ⁻¹

1. STEP
1. Schritt

COARSE GROB



Item / Artikel	AF11	AF3K	AF7
RA  10 REF	4681X010	4673X010	4677X010
100 REF	4681X100	4673X100	4677X100
Size / Maße (mm)	Ø 3 x 7,5	Ø 6,5 x 9,5	Ø 5 x 10

2. STEP
2. Schritt

MEDIUM MITTEL



Item / Artikel	BV11	BV3K	BV7
RA  10 REF	4781X010	4773X010	4777X010
100 REF	4781X100	4773X100	4777X100
Size / Maße (mm)	Ø 3 x 7,5	Ø 6,5 x 9,5	Ø 5 x 10

3. STEP
3. Schritt

FINE FEIN



Item / Artikel	GH11	GH3K	GH7
RA  10 REF	4881X010	4873X010	4877X010
100 REF	4881X100	4873X100	4877X100
Size / Maße (mm)	Ø 3 x 7,5	Ø 6,5 x 9,5	Ø 5 x 10

UNIVERSAL

1 PROCESSING STEP
Bearbeitungsschritt

RA

// COMPOSITE

Komposit

// FELDSPAR CERAMIC

Feldspatkeramik

// AMALGAM

Amalgam

// GOLD

Gold

- ⊕ For smoothing all dental materials
Glättet alle dentalen Restaurationsmaterialien

- ⊕ Soft silicone bonding adapts to the surface being processed
Weiche Silikonbindung passt sich der Oberfläche an

Set RA 101

REF 9070

1x: W11 | W1 | W2 | W2B | W5 | W7 | W8 | W9



Grit / Körnung	Silicon carbide / Siliziumcarbid
Binder / Bindung	Silicone / Silikon
Usage / Verwendung	Multiple / Mehrfach
Autoclavable / Autoklavierbar	Yes / Ja
Rec. rpm / Empf. U/min	7.000 - 10.000 min ⁻¹

1. STEP

MEDIUM MITTEL



Item / Artikel			W11	W1	W5	W7
RA	10	REF	1081X010	1071X010	1075X010	1077X010
	100	REF	1081X100	1071X100	1075X100	1077X100
Size / Maße (mm)			Ø 3 x 7,5	Ø 5,5 x 15	Ø 9 x 8,5	Ø 7 x 10

EVEBRUSH

RA

// COMPOSITE

Komposit

- ⊕ For polishing occlusal fillings
Für die Politur von okklusalen Füllungen
- ⊕ Application without polishing paste
Anwendung ohne Polierpaste
- ⊕ Heat resistant and autoclavable polyamide Fiber
Hitzebeständige und autoklavierbare Polyamidfaser

Grit / Körnung	Silicon carbide / Siliziumcarbid
Fibers / Fasern	Nylon / Nylon
Usage / Verwendung	Multiple / Mehrfach
Autoclavable / Autoklavierbar	Yes / Ja
Rec. rpm / Empf. U/min	max. 10.000 min ⁻¹



HARD HART



Item / Artikel			WT1	WZ1	WS1
RA	1	REF	9491X001	9492X001	9493X001
	10	REF	9491X010	9492X010	9493X010
Size / Maße (mm)			Ø 6 x 5,5	Ø 4 x 6,5	Ø 4 x 6,5

BRACKET *plus*

RA 

// DEBONDING

Bracketentfernung

- ⊕ **For removal of remnants after debonding**
Für die Entfernung von Bracketkleberesten
- ⊕ **Does not harm the enamel**
Die natürliche Zahnhartsubstanz wird nicht verletzt
- ⊕ **PROPHYCLEAN is recommended for removal of hard bracket remnants**
Für hartnäckige Klebereste wird PROPHYCLEAN empfohlen

Set RA 431

REF 9097

1x: BRP11 | BRP7 | BRP3 | BRP6

+ **PROPHYCLEAN**
(Selective removal / Punktueller Abtrag)
PC-100 5

Grit / Körnung	Glass / Glas
Binder / Bindung	Polyurethane / Polyurethan
Usage / Verwendung	 Multiple / Mehrfach
Autoclavable / Autoklavierbar	Yes / Ja
Rec. rpm / Empf. U/min	 5.000 - 7.000 min ⁻¹



Item / Artikel			BRP11	BRP7	BRP3	BRP6
RA 	10	REF	5681X010	5677X010	5673X010	5676X010
	100	REF	5681X100	5677X100	5673X100	5676X100
Size / Maße (mm)			Ø 3 x 7,5	Ø 5,4 x 10,5	Ø 5,7 x 8,6	Ø 10 x 0,7

PROPHYCLEAN

2 PROCESSING STEPS
BearbeitungsschritteRA 

// PROPHYLAXIS

Prophylaxe

// DEBONDING

Bracketentfernung

- ⊕ **Removes calculus and stains**
Entfernt Zahnstein und Verfärbungen
- ⊕ **Special grit prevents damage to the enamel**
Spezielle Körnung verhindert Schädigung des Zahnschmelzes
- ⊕ **Fiber free**
Faserfrei

Grit / Körnung	Glass / Glas
Binder / Bindung	Synthetic / Synthetisch
Usage / Verwendung	 Multiple / Mehrfach
Autoclavable / Autoklavierbar	Yes / Ja
Rec. rpm / Empf. U/min	 5.000 - 10.000 min ⁻¹

1. STEP


COARSE GROB



Item / Artikel			PC-100g	PC-102g	PC-103g
RA 	1	REF	8700X001	8702X001	8703X001
	10	REF	8700X010	8702X010	8703X010
Size / Maße (mm)			Ø 2,35 x 9	Ø 2,35 x 7	Ø 2,35 x 7,5

Set RA 411

REF 9081

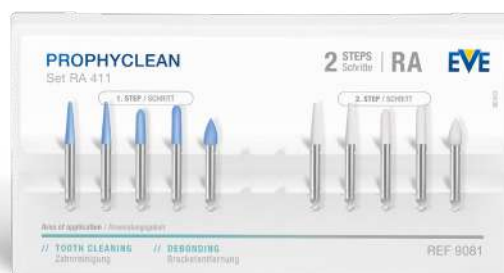1x: PC-100g | PC-102g | PC-103g | PC-111g
1x: PC-100 | PC-102 | PC-103 | PC-111 10

2. STEP

MEDIUM MITTEL



Item / Artikel			PC-100	PC-102	PC-103
RA 	1	REF	8800X001	8802X001	8803X001
	10	REF	8800X010	8802X010	8803X010
Size / Maße (mm)			Ø 2,35 x 9	Ø 2,35 x 7	Ø 2,35 x 7,5

RAINBOW IPR


DIAMOND COATED
Diamantiert

4 PROCESSING STEPS
Bearbeitungsschritte

STRIPS / Streifen
// COMPOSITE

Komposit

// ENAMEL

Zahnschmelz

- ⊕ **Diamond-coated separating strips with holder for interproximal reduction (IPR)**
Diamantierte Separierstreifen mit Halter zur manuellen Behebung von Zahnengständen mittels Stripping
- ⊕ **To widen contact points and gaining space by approximal enamel reduction**
Zur Öffnung des Interdentalraums und Platzgewinnung durch approximale Schmelzreduktion
- ⊕ **Available with single-sided and double-sided coating**
Einseitig und beidseitig beschichtet erhältlich
- ⊕ **Autoclavable and reusable**
Autoklavierbar und wiederverwendbar

Grit / Körnung	Diamond / Diamant
Separating strip / Separierstreifen	Stainless Steel / Edelstahl
Usage / Verwendung	↔ Multiple / Mehrfach
Autoclavable / Autoklavierbar	Yes / Ja

Starter Set Double


REF 9017

 1x: RB-SAW
1x: RBD-C | RBD-M | RBD-F | RBD-XF
5x: Holder / Halter

Starter Set Single


REF 9015

 1x: RB-SAW
1x: RBS-C | RBS-M | RBS-F | RBS-XF
5x: Holder / Halter

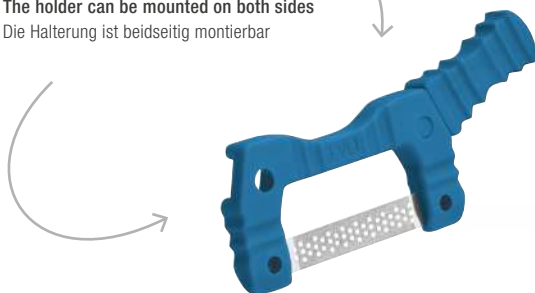 The holder can be mounted on both sides
Die Halterung ist beidseitig montierbar

All items are delivered including holders
Alle Artikel werden inklusive Halterungen geliefert

Serrated strip Sägestreifen

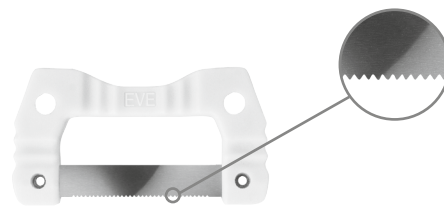- ⊕ **Serrated metal strip**
Gezählter Metallstreifen
- ⊕ **For opening contact points**
Zur Öffnung enger Kontaktpunkte
- ⊕ **For removing excess coronal material**
Zur Entfernung von koronalen Überschüssen



Item / Artikel		RB-SAW
5	REF	9205X005
Size / Maße (mm)		32 x 17
Thickness / Stärke (mm)		0,05
Coating / Beschichtung		NOT diamond coated

RAINBOW IPR

DIAMOND COATED
Diamantiert4 PROCESSING STEPS
Bearbeitungsschritte

STRIPS / Streifen

// COMPOSITE



Komposit

// ENAMEL

Zahnschmelz

1. STEP
Schritt



COARSE GROB

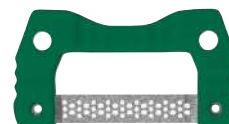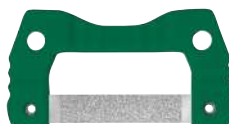

Item / Artikel	RBS-C	RBD-C
5 REF	9201X005	9301X005
Size / Maße (mm)	32 x 17	32 x 17
Thickness / Stärke (mm)	0,16	0,24
Coating / Beschichtung	single sided	double sided

2. STEP
Schritt



MEDIUM MITTEL

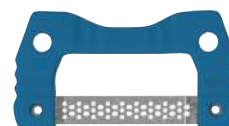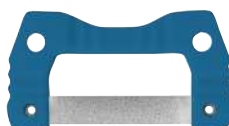

Item / Artikel	RBS-M	RBD-M
5 REF	9202X005	9302X005
Size / Maße (mm)	32 x 17	32 x 17
Thickness / Stärke (mm)	0,11	0,16
Coating / Beschichtung	single sided	double sided

3. STEP
Schritt



FINE FEIN

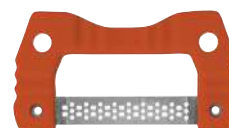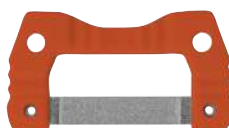

Item / Artikel	RBS-F	RBD-F
5 REF	9203X005	9303X005
Size / Maße (mm)	32 x 17	32 x 17
Thickness / Stärke (mm)	0,08	0,12
Coating / Beschichtung	single sided	double sided

4. STEP
Schritt

EXTRA FINE EXTRA FEIN

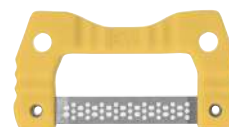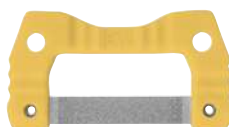

Item / Artikel	RBS-XF	RBD-XF
5 REF	9204X005	9304X005
Size / Maße (mm)	32 x 17	32 x 17
Thickness / Stärke (mm)	0,07	0,08
Coating / Beschichtung	single sided	double sided

DIASTRIPS



DIAMOND COATED
Diamantiert

3 PROCESSING STEPS
Bearbeitungsschritte

STRIPS / Streifen

// **COMPOSITE** Komposit // **FELDSPAR CERAMIC** Feldspatkeramik // **LITHIUM DISILICATE** Lithium-Disilikat // **ZIRCONIA** Zirkonoxid // **HYBRID CERAMIC** Hybridkeramik // **NPM ALLOYS** NEM-Legierungen // **ENAMEL** Zahnschmelz

- ⊕ **For manual surface processing**
Für die manuelle Oberflächenbearbeitung
- ⊕ **Interdental application**
Interdentale Anwendung
- ⊕ **Perforation removes the cut material**
Lochung führt abgetragenes Material ab

Set PDL4 3x: PDL-45/4 | PDL-35/4 | PDL-10/4
REF 9014



Set PDL2,5 3x: PDL-45/2,5 | PDL-35/2,5 | PDL-10/2,5
REF 9012



1. STEP

COARSE GROB



Item / Artikel	PDL-45/4	PDL-45/2,5
9 REF	9101X009	9106X009
Size / Maße (mm)	4 x 150	2,5 x 150
Thickness / Stärke (mm)	0,11	0,11
Coating / Beschichtung	single sided	single sided

2. STEP

MEDIUM MITTEL



Item / Artikel	PDL-35/4	PDL-35/2,5
9 REF	9102X009	9107X009
Size / Maße (mm)	4 x 150	2,5 x 150
Thickness / Stärke (mm)	0,10	0,10
Coating / Beschichtung	single sided	single sided

3. STEP

FINE FEIN



Item / Artikel	PDL-10/4	PDL-10/2,5
9 REF	9103X009	9108X009
Size / Maße (mm)	4 x 150	2,5 x 150
Thickness / Stärke (mm)	0,07	0,07
Coating / Beschichtung	single sided	single sided

100 years
anniversary



Please note that this brochure does only include part of the extensive range of rotary finishing and polishing instruments. For more information visit www.eve-rotary.com.

Bitte beachten Sie, dass diese Broschüre nur einen Teil des umfangreichen Sortiments an rotierenden Finier- und Polierinstrumenten enthält. Für weitere Informationen besuchen Sie www.eve-rotary.com.

since 1925



www.eve-rotary.com/haendler

**Want to buy EVE products?
Scan the QR code to find your local supplier.**

Sie wollen EVE Produkte kaufen?
Scannen Sie den QR-Code und finden Sie einen Händler.



Perfect Surfaces.

EVE Ernst Vetter GmbH · Neureutstr. 6 · 75210 Kelttern, Germany

+49 (0) 72 31 97 77 -0 @ info@eve-rotary.com www.eve-rotary.com



**Scan the QR code to
download the pdf**

Jetzt als PDF herunterladen

