


ENOKOMPONENTNI UNIVERZALNI BOND KI SE STRJUJE NA SVETLOBI

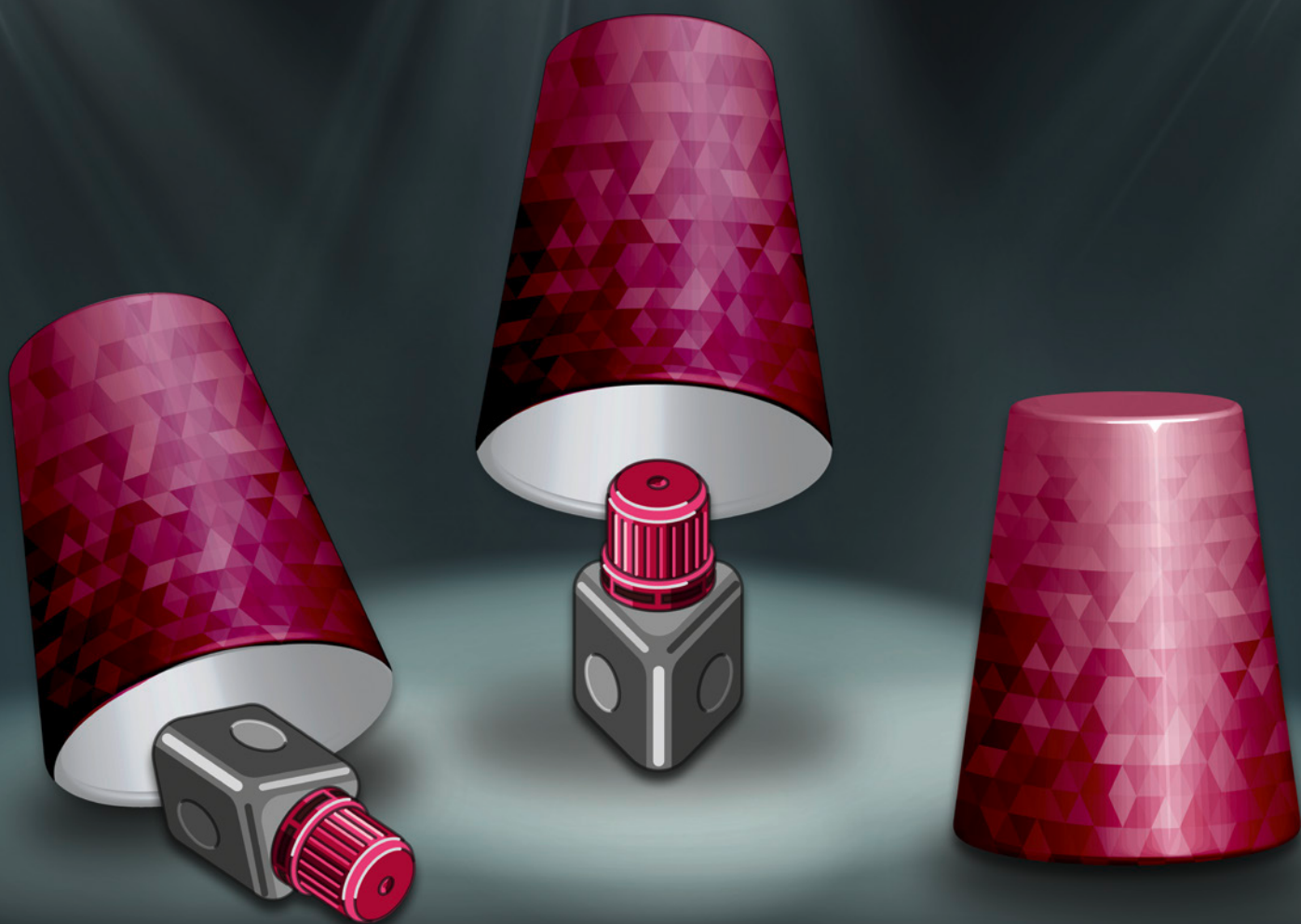

VEDNO PRAVA ODLOČITEV

ONE COAT 7 UNIVERSAL

Vse v enem

 **COLTENE**

Oblike pakiranja

Nova in edinstvena steklenička

Nova ergonomska steklenička z optimizirano kapalko se razlikuje zaradi svojega natančnega, čistega odmerjanja brez stalnega iztekanja.

- Do 300 nanosov*
- Poenostavljeno rokovanje
- Ergonomsko



Praktično pakiranje za enkratno uporabo

ONE COAT 7 UNIVERSAL je na voljo kot higiensko praktično pakiranje za enkratno uporabo. Za preprosto in vsestransko učinkovitost pri vsakodnevnem rutinskem delu v praksi.

- Uporabniku prijazno
- Preprost nanos
- Higiensko



*Vir: interni podatki

Vsestranski


En bond za vse tehnike nanosa

- Izjemne vrednosti vezave na sklenino in dentin
- Izvrstno robno tesnjenje
- Manjša pooperativna občutljivost

Z optimizacijo sistema ONE COAT 7.0 je zanesljiv bond vse v enem ONE COAT 7 sedaj na voljo za vse indikacije.

Čarobni trikotnik


Naj je uporabljen samojedkajoči adhezivni sistem ali adhezivni sistem z jedkanjem in spiranjem ali selektivno jedkanje, ONE COAT 7 UNIVERSAL je primeren za vse tehnike. Učinkovita vezava na materiale kot so zlato, titan, keramika, cirkonijev oksid in kompoziti čisto brez dodatne uporabe premaza ali silana.

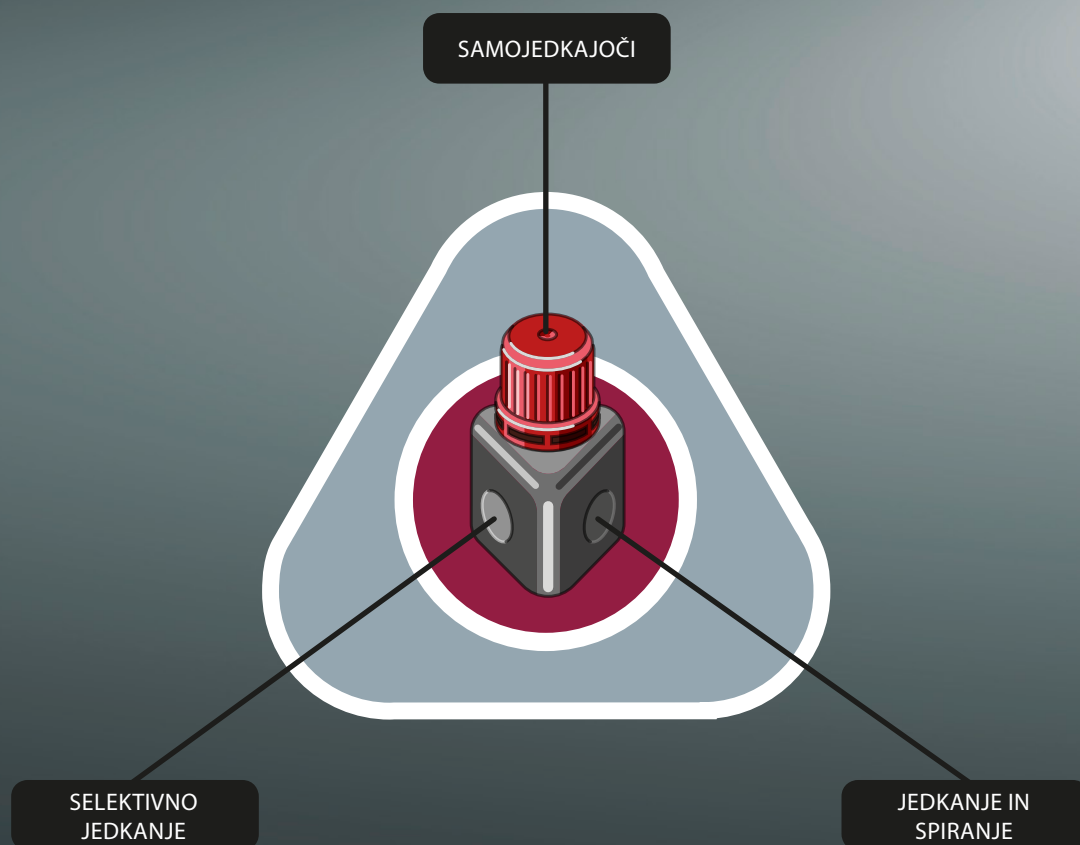

Tehnični podatki


Testna metoda

Grafi predstavljajo strižno trdnost vezave (SBS/MPa) po Watanabe. Visoka moč vezave kaže na dobro substanco med sredstvom za vezavo in trdimi tkivi zoba. To je odločilno za dobro vezavo dentalnih restavracij.

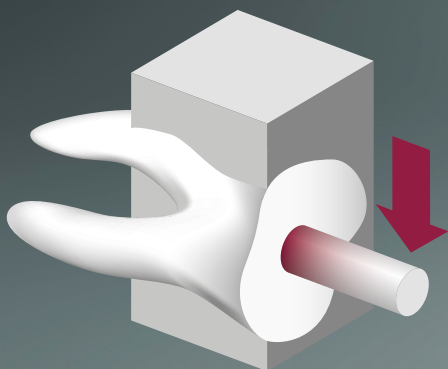


Shematska predstavitev SBS

Primerjava strižne trdnosti vezave (SBS/MPa) z uporabo samojedkajočega adhezivnega sistema

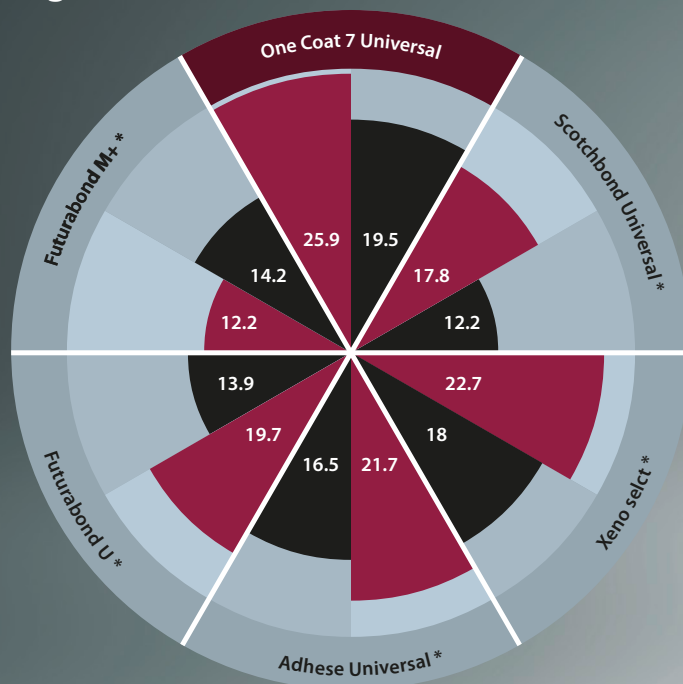


Primerjava strižne trdnosti vezave (SBS/MPa) z uporabo adhezivnega sistema z jedkanjem in spiranjem

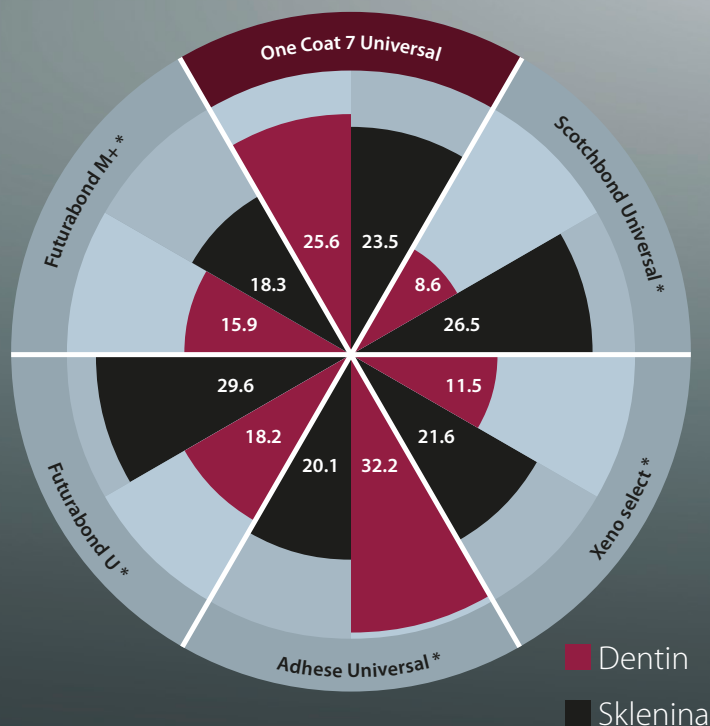

Lastnosti

Protibakterijsko*

ONE COAT 7 UNIVERSAL so testirali glede protibakterijskega* učinka.

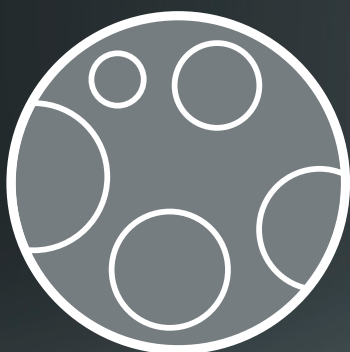

*Testiranje s testom proliferacije za protimikrobno aktivnost s *S.epidermidis* je izvedel QualityLabs, Nemčija.

Kemično strjevanje

Posebni aktivator One Coat 7.0 Activator zagotavlja združljivost z materiali, ki se strjujejo kemično.



ONE COAT 7 UNIVERSAL
vsebuje:



*Methacryloyl-oxydecyl-dihydrogenphosphat

Informacije za naročanje




- 60019538 ONE COAT 7 UNIVERSAL uvajalni komplet**
- 1 × 5 ml One Coat 7 Universal
 - 1 × 2,5 ml Sredstvo za jedkanje Etchant Gel S
 - 1 × 20 Nanašalni nastavki
 - 1 × 50 Črne ščetke
 - 1 × Mešalna posoda
 - 1 × Pokrov za mešalno posodo

- 60019539 ONE COAT 7 UNIVERSAL refill**
- 1 × 5 ml One Coat 7 Universal

- 60019540 ONE COAT 7 UNIVERSAL za enkratno uporabo**
- 50 × 0,1 ml One Coat 7 Universal za enkratno uporabo
 - 1 × 50 Črne ščetke



- 7054 ONE COAT 7.0 Komplet z aktivatorjem**
- 1 × 3 ml One Coat 7.0 Aktivator
 - 1 × 50 Črne ščetke

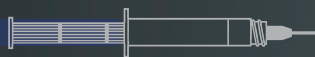

- 7373 Komplet Etchant Gel S**
- 2 × 2,5 ml Brizga
 - 1 × 20 Nanašalni nastavki

- 7634 Črne ščetke**
- 1 × 50 Črne ščetke



© 2016 Coltène/Whaledent AG
www.coltene.com | oc7universal.coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA
T +1 330 916 8800
F +1 330 916 7077
info.us@coltene.com



COLTENE